

NUEVA VERSIÓN 2609

Novedades

Os presentamos las novedades de la versión de Septiembre.

1_MEDICAMENTOS. Aviso medicamentos caducados

Esta funcionalidad permite avisar al usuario con un número de días de antelación cuando un medicamento está próximo a caducar. El número de días de aviso puede configurarse desde Preferencias.

Si la fecha de caducidad de algún medicamento se encuentra dentro del rango, se mostrará cómo caducado:

TRATAMIENTO DEL PACIENTE

ALTA: 25/06/2025
BAJA:

Archivo Tratamiento

TRATAMIENTO

Introducir Medicamento

Carga Anticolinérgica: 0

HISTORICO

MODIFICAR

CÓDIGO MEDICAMENTO	F. IND F. FIN	POSOLÓGIA	MÉDICO	ENTREGA PROSPECTO	STOCK
2383268 ZZZQUEL PROCTER & GAMBLE INC 12/24/36	17/07	0-1-0-0			300
438034 (20 MMOL/L) POTASSIUM CHLORIDE IN 5.3% DEXTROSE AN D 0.3% 17/07	1-0-0-0				20
9330674 UROGRAPIN 370 MG 1000 ML SOLUCION INYECTABLE Y PARA PERFUSION 25/06	1-0-0-0				100

INVENTARIO

MODIFICAR

CÓDIGO MEDICAMENTO	LOTE	CADUCIDAD
9330674 UROGRAPIN 370 MG 1000 ML SOLUCION INYECTABLE Y PARA PERFUSION, 1 AMPOLLA DE 20 ML	MA0816	30/06/2030
438034 (20 MMOL/L) POTASSIUM CHLORIDE IN 5.3% DEXTROSE AN D 0.3% SODIUM CHLORIDE INJECTION USP BAYT 1238		31/08/2025
2383268 ZZZQUEL PROCTER & GAMBLE INC 12/24/36	998	25/07/2025

En la pantalla de carga, si la fecha fin de blíster entra en el rango del día seleccionado y la fecha de caducidad, también mostrará como medicamento caducado.

2_ PACIENTES. Mostrar fecha fin del último blíster preparado

En caso de tener activado el aviso de que hay blísters por preparar (mayor que 0), se muestra una nueva columna con la fecha fin del último blíster preparado tanto para los pacientes a los que haya que preparar el blíster como a los que no. Los pacientes que no tengan blísters realizados no se les muestra esta fecha.

IDENTIFICADOR	NOMBRE	DNI	ACTIVO	CATEGORÍA	TÉLEFONO	F. FIN ULTIMO BLISTER
6	Juan	37162487A	SI	categoría prueba código	654624654	12/05/2026
7	ohane	23423432	SI		234234	13/05/2026
8	carmen	34234	SI		65656	
9	Lali	534535	SI		3453453	27/05/2026

3_ RETORNO. Incluir botón para seleccionar todos los alveolos

Se añade un botón para retornar todas las tomas a la vez.

RETORNO DEL BLISTER DEL PACIENTE

Archivo Blister Otros

REF. BLISTER: 5

F. DE RETORNO: 21/07/2026

TOMAS CORRECTAS: 28

TOMAS INCORRECTAS: 0

% ADHERENCIA: 100

TOMAS RETORNADAS
MOTIVO

RETORNAR TODAS LAS TOMAS


También se ha incluido la información de la adherencia en el listado de retorno.

TOMAS CORRECTAS: 5

TOMAS INCORRECTAS: 2

% ADHERENCIA: 71



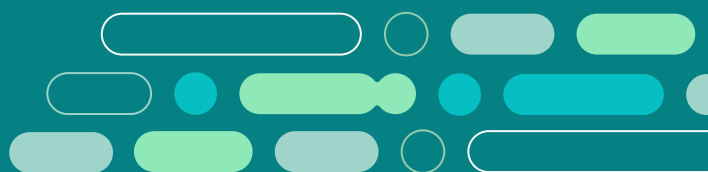

4_ CONSULTA BLISTER. Indicador de modificación

Esta funcionalidad consiste en marcar los blister que se han modificado después de realizar la carga, con el objetivo de localizar fácilmente frente a los no modificados.


Cuando realizamos una modificación del blister, incluimos un comentario con el cambio realizado. Un blister con algún comentario, se marca en color azul para diferenciarlo frente a un blister sin modificación.



5_ CARGA. Orden caducidad


Poder lanzar la carga por orden de caducidad del mismo medicamento. Para utilizar esta opción se deberá activar desde preferencias:



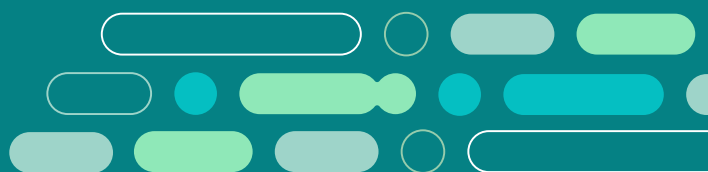

6_CircuTrack. Indicador de carga no sincronizada o pendiente

Cuando un paciente tiene asociado un dispositivo CircuTrack programado online, al final de la carga se incluye un indicador para avisar si la carga online no se ha completado o está pendiente.

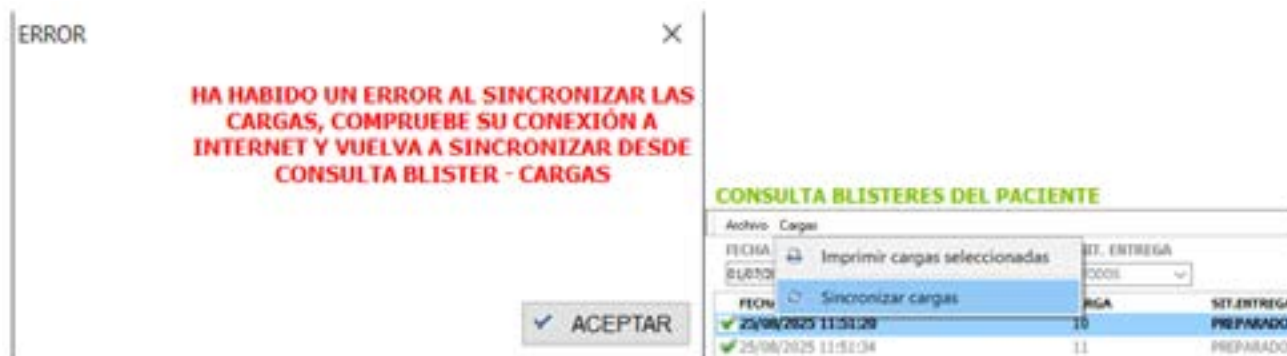


En caso que la carga se encuentre pendiente, el dispositivo no puede recibir la programación correspondiente, y desde la farmacia hay que conectar a internet para que la sincronización se realice.

7_Forzar escaneo manual

Para el escaneo manual se implementa un botón “iniciar” para evitar bloqueos a la hora de escanear en carga manual, esto es, ya sea porque es un medicamento inventado o no tiene el código a mano, si el usuario tiene forzar escaneo manual activado se queda en la pantalla de carga y no puede avanzar con el blister. Para evitar ese bloqueo, se implementa un botón “Iniciar” para saltar el paso de escaneo.



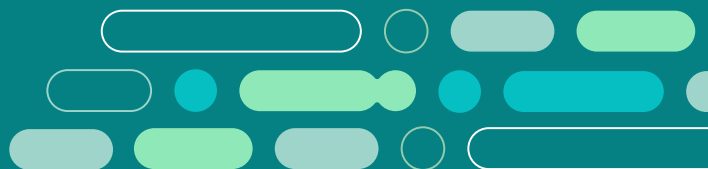

9_Aviso al cerrar la aplicación

Esta funcionalidad presenta un aviso al cerrar la aplicación para que el usuario no interrumpa el proceso de cierre ordenado de pantallas abiertas con guardado en la base de datos, así como el proceso de backup de la base de datos de forma automática.



Si este proceso no se realiza correctamente, o se interrumpe por el usuario por ejemplo apagando el interruptor del ordenador, el proceso de guardado no se completa, el backup no se realiza, y en caso de problemas y tener que usar la recuperación, se puede perder el trabajo no guardado en la copia de seguridad.

Por todo ello es importante, que el usuario termine la aplicación de forma controlada de acuerdo al aviso indicado.

10_Etiqueta imprimible 7x4 a color

Se añaden dos nuevas plantillas de etiqueta imprimible para blisters 7x4, con colores de la tapa original..



Etiqueta con días en el ALVEOLO (COLOR)

Etiqueta con días en el CIRCULO (COLOR)

Etiqueta COFM

Esta funcionalidad consiste en configurar etiqueta reconfigurable para COFM, en las farmacias que lo soliciten. Para realizar la configuración seguir el siguiente procedimiento:

- Completar el código provincia de la farmacia dentro de la comunidad de Madrid. preferencias: 28
- Activar una categoría para incluir los pacientes a los que se aplica esta etiqueta
- Activar la personalización de etiqueta dentro de la pestaña correspondiente.

Estos grupos se definen desde la definición del medicamento. Los colores preestablecidos son azul (G1 y G2) y rojo (G3) pero se puede modificar por cualquier otro. También se podrán añadir grupos nuevos.



Logo etiqueta Ayuntamiento de Guadalajara

Esta funcionalidad consiste en actualizar el logo de la etiqueta para los pacientes que pertenecen a la categoría de Ayuntamiento de Guadalajara. Este logo se actualiza solo, y la farmacia no tiene que realizar ninguna configuración adicional.



11_Aviso Medicación Anticolinérgica

Esta funcionalidad consiste en calcular la carga anticolinérgica del tratamiento farmacológico de un paciente mediante la Anticholinergic Burden Calculator (ABC), con el objetivo de adecuar el tratamiento con una carga anticolinérgica alternativa menor, y reducir el riesgo para el paciente.

Esta opción está desactivada por defecto, y se puede configurar desde Preferencias - Avisos como se presenta en la imagen siguiente.

En tratamiento, se añade un campo con el valor de Carga Anticolinérgica total (con la suma de las cargas de cada medicamento), y un código de color asociado. De 0 verde (sin carga anticolinérgica), de 1 a 2 naranja (el riesgo suele ser bajo), y > 2 rojo (alta, clínicamente significativa).

TRATAMIENTO DEL PACIENTE ALTA: 26/06/2026
BAJA:

Archivo Tratamiento

TRATAMIENTO + INTRODUCIR MEDICAMENTO Carga Anticolinérgica HISTORICO IMPRIMIR

Todos MODIFICAR BORRAR

CÓDIGO	MEDICAMENTO	F. INIC.F. FIN	POSOLÓGIA	MÉDICO	F.ENTREGA PROSPECTO	STOCK	CARGA ANTIC.
1400239	CARBAMAZEPINA 40 MG/ML. 3VIAJE 1 FRASCO 300 ML	02/07/21	1-1-0-0			300	2
3009071	B.O.P., COMPRIMÉ ENTROBÉ 1 flacon(0) polypropylene de 60 comprimé(0)1/07/21		1-1-0-1			20	0
294748	10% CALCIUM CHLORIDE INJECTION USP HOSPRA HEALTHC ARE CO 30/06/21		0-1-0-0			300	0
1931741	0.15% POTASSIUM CHLORIDE IN 3.3% DEXTROSE AND 0.30 % SODI. 30/06/21		0-0-1-0			300	0
438049	(20 MMOL/L) POTASSIUM CHLORIDE IN 5% DEXTROSE INJECTION USP 30/06/21		0-1-0-0			150	0
2383268	ZZZQUE PROCTER & GAMBLE INC 12/24/36	30/06/21	0-0-0-1			300	0

Al borrar, modificar o añadir un medicamento, la Carga Anticolinérgica se recalcula.

En caso necesario es responsabilidad del farmacéutico buscar una alternativa a cada medicamento para reducir la carga correspondiente.

12_Traduccion a idiomas de comunidades autónomas

El programa FMD se ha traducido a distintos idiomas que seleccionamos desde su opción correspondiente”.

- [Catalá](#)
- [Vasco](#)
- [Gallego](#)
- [Valenciano](#)



Los siguientes elementos no están traducidos:

- Evolución asistencial. Datos Maestros
- Manual de Usuario
- Etiquetas
- Tapas Blister
- Máquina